



ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ

FRAUTEST

express

2 ДНЯ ДО ЗАДЕРЖКИ

MADE IN GERMANY



1
ТЕСТ-ПОЛОСКА
ТОЧНОСТЬ
СВЫШЕ
99%



Мешок для определения беременности FRAUTEST express

ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
БЕРЕМЕННОСТИ



FRAUTEST
express



1
ТЕСТ-ПОЛОСКА
ТОЧНОСТЬ
СВЫШЕ
99%



2 ДНЯ ДО ЗАДЕРЖКИ

MADE IN GERMANY

FRAUTEST
ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ

Откройте фольгированный пакет и поместите в тест-полоску, держа ее за отмеченный конец. Опустите тест-полоску вертикально в емкость с мочой, до отметки, указанной стрелками на 10 секунд. Положите тест-полоску на горизонтальную сухую поверхность. Через 3-5 минут оцените результат, но не позднее 10 минут.

ПЕРЕД ТЕСТИРОВАНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНО
ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ!

Если Вам нужна помощь и консультации по вопросу
индивидуальной беременности, звоните 8-800-195-44-05
(звонок по России бесплатный)



ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ

FRAUTEST

express

2 ДНЯ ДО ЗАДЕРЖКИ

MADE IN GERMANY

1
ТЕСТ-ПОЛОСКА
ТОЧНОСТЬ
СВЫШЕ
99%



LOT: партиа №
P: голден фл.



В комплект входит 1 тест-полоска (код товара 200-801649).
Производитель: FRAUTEST (код товара 200-801649).
Импортер: ООО «НеваСерт» (код товара 200-801649).
Адрес: 125080, Москва, Конюшенный переулок, 2, 2-й этаж. МП: 05.08.2015. 003487.
Срок годности: 18 месяцев. Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте, при температуре от +5 до +25°C.
Срок годности: 18 месяцев. Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте, при температуре от +5 до +25°C.
Срок годности: 18 месяцев. Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте, при температуре от +5 до +25°C.






ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ

FRAUTEST



2 ДНЯ ДО ЗАДЕРЖКИ

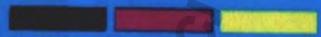

MADE IN GERMANY

double control



2
ТЕСТ-ПОЛОСКИ
ТОЧНОСТЬ
СВЫШЕ
99%





ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ

FRAUTEST

expert

2 ДНЯ ДО ЗАДЕРЖКИ



MADE IN GERMANY

1

ТЕСТ-КАССЕТА
ТОЧНОСТЬ
СВЫШЕ
99%



Лист для определения беременности FRAUTEST expert

ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
БЕРЕМЕННОСТИ



FRAUTEST
expert



2 ДНЯ ДО ЗАДЕРЖКИ

MADE IN GERMANY

1
ТЕСТ-КАССЕТА
ТОЧНОСТЬ
СВЫШЕ
99%



FRAUTEST
ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ

Заклейте фольгированный пакет и извлеките тест-кассету и пипетку. Приготовьте емкость под струю мочи и наполните. С помощью пипетки закапайте в круглое отверстие 4 капли мочи. Положите тест-кассету на горизонтальную сухую поверхность. Через 3-5 минут оцените результат, но не позднее 10 минут.

ПЕРЕД ТЕСТИРОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО
ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ!

Если Вам нужна помощь и консультация по вопросам
использования тестов беременности, звоните 8-800-100-43-55
(звонок по России бесплатный).



ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ

FRAUTEST

expert

2 ДНЯ ДО ЗАДЕРЖКИ

MADE IN GERMANY

1
ТЕСТ-КАССЕТА
ТОЧНОСТЬ
СВЫШЕ
99%



См. инструкцию по применению на упаковке. Коды EAN-13: 4 601834 003524. Коды EAN-8: 601834. Коды EAN-5: 60183. Коды EAN-2: 6018. Коды EAN-1: 601. Коды EAN-0: 60. Коды EAN-9: 601834003524. Коды EAN-10: 6018340035240. Коды EAN-11: 60183400352400. Коды EAN-12: 601834003524000. Коды EAN-13: 6018340035240000. Коды EAN-14: 60183400352400000. Коды EAN-15: 601834003524000000. Коды EAN-16: 6018340035240000000. Коды EAN-17: 60183400352400000000. Коды EAN-18: 601834003524000000000. Коды EAN-19: 6018340035240000000000. Коды EAN-20: 60183400352400000000000. Коды EAN-21: 601834003524000000000000. Коды EAN-22: 6018340035240000000000000. Коды EAN-23: 60183400352400000000000000. Коды EAN-24: 601834003524000000000000000. Коды EAN-25: 6018340035240000000000000000. Коды EAN-26: 60183400352400000000000000000. Коды EAN-27: 601834003524000000000000000000. Коды EAN-28: 6018340035240000000000000000000. Коды EAN-29: 60183400352400000000000000000000. Коды EAN-30: 601834003524000000000000000000000. Коды EAN-31: 6018340035240000000000000000000000. Коды EAN-32: 60183400352400000000000000000000000. Коды EAN-33: 601834003524000000000000000000000000. Коды EAN-34: 6018340035240000000000000000000000000. Коды EAN-35: 60183400352400000000000000000000000000. Коды EAN-36: 601834003524000000000000000000000000000. Коды EAN-37: 6018340035240000000000000000000000000000. Коды EAN-38: 60183400352400000000000000000000000000000. Коды EAN-39: 601834003524000000000000000000000000000000. Коды EAN-40: 6018340035240000000000000000000000000000000. Коды EAN-41: 60183400352400000000000000000000000000000000. Коды EAN-42: 601834003524000000000000000000000000000000000. Коды EAN-43: 6018340035240000000000000000000000000000000000. Коды EAN-44: 60183400352400000000000000000000000000000000000. Коды EAN-45: 601834003524000000000000000000000000000000000000. Коды EAN-46: 6018340035240000000000000000000000000000000000000. Коды EAN-47: 60183400352400000000000000000000000000000000000000. Коды EAN-48: 601834003524000000000000000000000000000000000000000. Коды EAN-49: 601834003524000000000000000000000000000000000000000. Коды EAN-50: 60183400352400. Коды EAN-51: 601834003524000. Коды EAN-52: 60183400352400. Коды EAN-53: 601834003524000. Коды EAN-54: 60183400352400. Коды EAN-55: 601834003524000. Коды EAN-56: 60183400352400. Коды EAN-57: 601834003524000. Коды EAN-58: 601834003524000. Коды EAN-59: 60183400352400. Коды EAN-60: 60183400352400. Коды EAN-61: 601834003524000. Коды EAN-62: 601834003524000. Коды EAN-63: 60183400352400. Коды EAN-64: 601834003524000. Коды EAN-65: 60183400352400. Коды EAN-66: 601834003524000. Коды EAN-67: 60183400352400. Коды EAN-68: 601834003524000. Коды EAN-69: 60183400352400. Коды EAN-70: 601834003524000. Коды EAN-71: 60183400352400. Коды EAN-72: 601834003524000. Коды EAN-73: 60183400352400. Коды EAN-74: 601834003524000. Коды EAN-75: 60183400352400. Коды EAN-76: 601834003524000. Коды EAN-77: 60183400352400. Коды EAN-78: 601834003524000. Коды EAN-79: 60183400352400. Коды EAN-80: 601834003524000. Коды EAN-81: 60183400352400. Коды EAN-82: 601834003524000. Коды EAN-83: 60183400352400. Коды EAN-84: 601834003524000. Коды EAN-85: 60183400352400. Коды EAN-86: 601834003524000. Коды EAN-87: 60183400352400. Коды EAN-88: 601834003524000. Коды EAN-89: 60183400352400. Коды EAN-90: 601834003524000. Коды EAN-91: 60183400352400. Коды EAN-92: 601834003524000. Коды EAN-93: 60183400352400. Коды EAN-94: 601834003524000. Коды EAN-95: 60183400352400. Коды EAN-96: 601834003524000. Коды EAN-97: 60183400352400. Коды EAN-98: 601834003524000. Коды EAN-99: 60183400352400. Коды EAN-100: 601834003524000.



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

информация получена с официального сайта Росздравнадзора в сфере здравоохранения **FRAUTEST comfort**



ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ

FRAUTEST

comfort

2 ДНЯ ДО ЗАДЕРЖКИ

MADE IN GERMANY

1 СТРУЙНЫЙ ТЕСТ
ТОЧНОСТЬ СВЫШЕ 99%

15 МИНУТ

УЛЬТРАЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ

www.roszdravnadzor.ru



ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
БЕРЕМЕННОСТИ



FRAUTEST
comfort



1
**СТРУЙНЫЙ
ТЕСТ**
ТОЧНОСТЬ
СВЫШЕ
99%



2 ДНЯ ДО ЗАДЕРЖКИ

MADE IN GERMANY

FRAUTEST

ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ

comfort

ПЕРЕД ТЕСТИРОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО
ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ

Узнайте, как правильно пользоваться тестом, прочитав инструкцию. Не используйте тест, если срок годности истек. Не используйте тест, если упаковка повреждена. Не используйте тест, если вы не уверены в его качестве. Не используйте тест, если вы не уверены в его точности. Не используйте тест, если вы не уверены в его безопасности. Не используйте тест, если вы не уверены в его эффективности. Не используйте тест, если вы не уверены в его надежности. Не используйте тест, если вы не уверены в его долговечности. Не используйте тест, если вы не уверены в его точности. Не используйте тест, если вы не уверены в его безопасности. Не используйте тест, если вы не уверены в его эффективности. Не используйте тест, если вы не уверены в его надежности. Не используйте тест, если вы не уверены в его долговечности.

ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ



FRAUTEST

comfort

2 ДНЯ ДО ЗАДЕРЖКИ


MADE IN GERMANY



1
**СТРУЙНЫЙ
ТЕСТ**
ТОЧНОСТЬ
СВЫШЕ
99%



Производитель: ООО «НеваСертификейт», Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Шувалова, д. 100, к. 1, лит. А, этаж 10. Контактный центр: 8 (800) 400-00-00. Сайт: www.nevacert.ru. Адрес: Санкт-Петербург, ул. Шувалова, д. 100, к. 1, лит. А, этаж 10. Контактный центр: 8 (800) 400-00-00. Сайт: www.nevacert.ru.

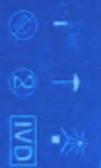

Тест для определения беременности FRAUTEST exclusive



Вместо для определения овуляции FRAUTEST ovulation

ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОВУЛЯЦИИ



FRAUTEST ovulation

5 ТЕСТ ПОЛОСОК + ЕМКОСТЬ ДЛЯ СБОРА МОЧИ



ДЛЯ ТОЧНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ

MADE IN GERMANY

FRAUTEST ovulation

Вскрыть фольгу и использовать тест-полоску, лежа на за окрытый кончик. Другими тест-полосками не пользоваться. Проверить срок годности. Срок годности: 10 месяцев. Срок годности: 10 месяцев. Срок годности: 10 месяцев.



ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОВУЛЯЦИИ

FRAUTEST ovulation

ДЛЯ ТОЧНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ

MADE IN GERMANY


5 ТЕСТ ПОЛОСОК + ЕМКОСТЬ ДЛЯ СБОРА МОЧИ



MADE IN GERMANY



Набор тестов для определения овуляции и беременности FRAUTEST планинг

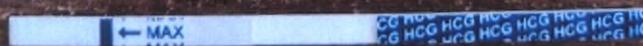

НАБОР ТЕСТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОВУЛЯЦИИ И БЕРЕМЕННОСТИ



FRAUTEST *planning*

5 ТЕСТ ПОЛОСОК + 2 ТЕСТА НА БЕРЕМЕННОСТЬ



ДЛЯ ТОЧНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ

MADE IN GERMANY

FRAUTEST *planning*

НАБОР ТЕСТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОВУЛЯЦИИ И БЕРЕМЕННОСТИ

Этот тест определяет наличие беременности в течение 10 минут. Для этого достаточно нанести одну каплю мочи на тестовую полоску. Результат будет известен в течение 10 минут. Проверьте наличие беременности сразу после теста. Через 3-5 минут можно повторить тест на беременность.

Этот тест определяет наличие беременности в течение 10 минут. Для этого достаточно нанести одну каплю мочи на тестовую полоску. Результат будет известен в течение 10 минут. Проверьте наличие беременности сразу после теста. Через 3-5 минут можно повторить тест на беременность.



НАБОР ТЕСТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОВУЛЯЦИИ И БЕРЕМЕННОСТИ

FRAUTEST *planning*

ДЛЯ ТОЧНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ

MADE IN GERMANY

5 ТЕСТ ПОЛОСОК + 2 ТЕСТА НА БЕРЕМЕННОСТЬ



Этот тест определяет наличие беременности в течение 10 минут. Для этого достаточно нанести одну каплю мочи на тестовую полоску. Результат будет известен в течение 10 минут. Проверьте наличие беременности сразу после теста. Через 3-5 минут можно повторить тест на беременность.



Средства для определения беременности и овуляции. В комплект входят: 5 тестовых полосок для определения беременности и 2 тестовых полоски для определения овуляции. Для использования см. инструкцию. Срок годности: 12 месяцев. Условия хранения: в сухом месте при температуре от +5°C до +25°C. Производитель: Frautest GmbH, Германия.

MADE IN GERMANY



го прошито, пронумеровано
креплено печатью:
Четырнадцать листа(ов)
Генеральный директор
ООО "БОЛЕАР"
И. Денисов



Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

www.goszdravnadzor.ru