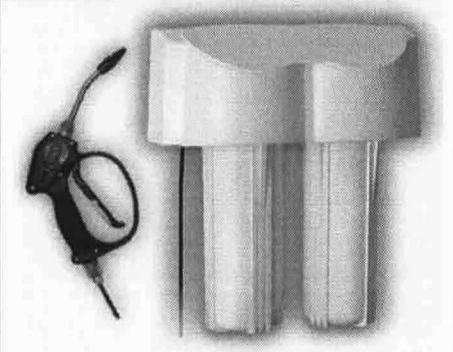
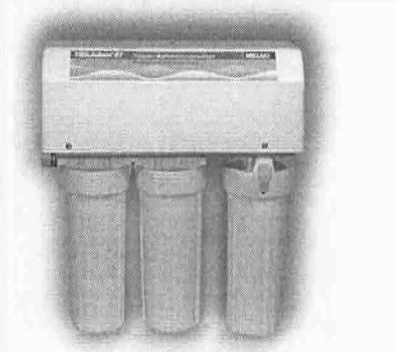

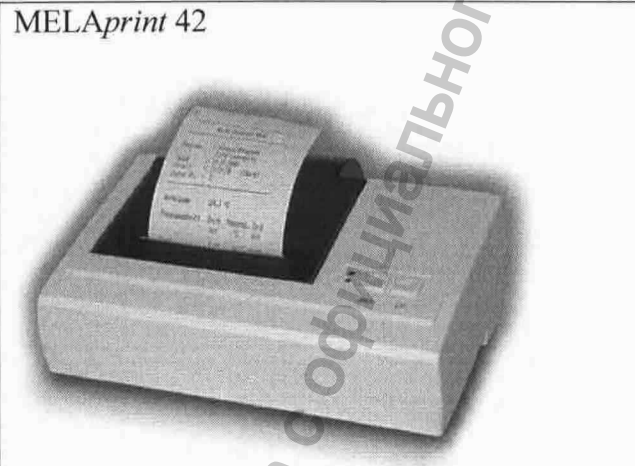
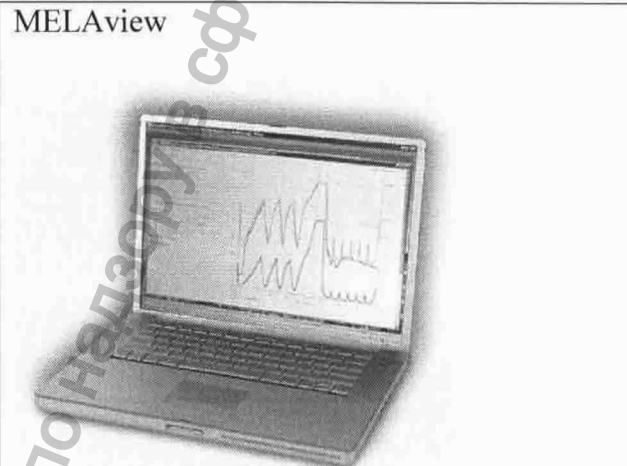


MELAdem 40	MELAdem 47	MELAdest 65
		

Часть водопроводной воды обрабатывается и используется для получения пара, другая часть используется для охлаждения вакуум-насоса. Подача деминерализованной воды и слив использованной воды производятся автоматически.

Документирование циклов стерилизации, требуемое законодательством, выполняется через встроенный последовательный интерфейс для подсоединения к принтеру MELAprint 42 или ПК клиники.

MELAprint 42	MELAview
	

Для этого потребуется программное обеспечение MELAwin , разработанное MELAG.

Документирование циклов стерилизации, требуемое законодательством выполняется через встроенный последовательный интерфейс (RS 232), для подсоединения к принтеру MELAprint 42 или ПК клиники. Для этого потребуется программное обеспечение MELAwin , разработанное MELAG.

Также можно распечатывать данные с помощью принтера протоколов MELAprint 42 или сохранять их на картах MELAflash CF Card. Протоколы стерилизации можно читать на любом компьютере с помощью MELAflash CF Card reader.

MELAflash CF Card	MELAflash CF Card reader
